

Note de service

Destinataire : Tout le personnel travaillant dans les RE, RNI de la direction DPSMDI


Expéditeur : Nadine Lajeunesse, conseillère-cadre en ergothérapie, DSM-PP
Jessica Ferland, cheffe de service des ressources d'établissement, DPSMDI
Marie-Pier Jobin, cheffe de service des ressources non-institutionnelles, DPSMDI
Conseillères en soins infirmiers, volet matériel et équipements de soins, DSI

Date : 12 novembre 2024

Objet : Sécurité et installation des barres d'appui au lit

Bonjour,

Ceci est pour vous informer que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a émis une communication le 26 juillet 2024 pour s'assurer que les barres d'appui au lit avec une seule barre transversale ne soient plus utilisées par les intervenants du réseau et ne soient plus prêtées aux usagers afin de réduire les risques de piégeage. Toutes les barres d'appuis doivent dorénavant comporter **au moins deux barres transversales**.

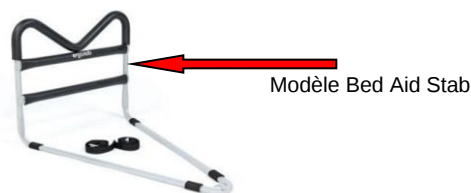

De plus, nous souhaitons vous aviser que le modèle retenu et recommandé par la DSI-DSM est : le **Bed-Aid Stab d'Ergolab**. Les autres modèles à deux barres transversales peuvent continuer à être utilisés, mais le Bed-Aid Stab devient le produit standard pour les nouveaux achats.

Produit	Code GRM	Code d'article	Photo
BARRE D'APPUI A POSITION UNIQUE FIXEE LIT RESIDENTIEL A/COURROIE (Bed-Aid STAB)	2000033235	BRMU-ADJ-4	

Vous trouverez les documents de référence sur Intranet via le lien suivant [Standards de produits et de matériel de soins \(rtss.qc.ca\)](http://Standards de produits et de matériel de soins (rtss.qc.ca)) OU via le chemin suivant: Soins et services/ Soins infirmiers/ Matériel et équipements en soins infirmiers/ Standards de produits et matériels de soins/ Barre d'appui Bed-Aid STAB.

- Guide d'installation
- Procédure pour l'installation des crochets
- Fiche technique du produit

Rappels suivants :

- Les barres d'appui doivent être installées selon les normes décrites dans le guide d'installation.
- Les barres d'appui ne peuvent pas être installées de façon sécuritaire sur une base de lit pleine. Advenant que l'utilisateur nécessite une barre d'appui, celle-ci doit être fixée avec plaque et vis sur la base de lit de façon à ce qu'elle ne puisse pas bouger. Dans le doute, il est recommandé de ne pas en installer avant de consulter le service d'ergothérapie secteur médecine physique de l'IUSMM.



Base de lit pleine

- Seul le Bed Aid Stab peut être installé de façon sécuritaire sur les bases de lit qui sont composées de lattes transversales. Les autres modèles de barre d'appui (type M-Rail) ne sont pas compatibles avec ces lits.



- En cas de doute ou de questions sur l'installation sécuritaire des barres d'appui dans les résidences, communiquez avec le service d'ergothérapie secteur médecine physique de l'IUSMM au (514) 251-4000 p. 2902.