



# Sterifilt – mode d'emploi



Filtrer la solution de drogue avant l'injection permet d'éliminer les particules non dissoutes qui pourraient bloquer l'aiguille, endommager les veines et causer diverses complications de santé.

Le Sterifilt® démontre une capacité filtrante légèrement supérieur au filtre de coton du Maxicup®.

- 1) Afin d'obtenir un emboîtement étanche, il faut appuyer fortement en vissant le Sterifilt® sur la seringue.
- 2) Filtrez lentement
- 3) Enlevez le Sterifilt® après la filtration et jetez-le (1 Sterifilt® = 1 injection)




**Injection de cocaïne ou d'héroïne** : Utilisez le filtre de coton du Maxicup® ou le Sterifilt®

Filtration simple

ou




La seringue **Dynarex** (27G) s'emboîte mal avec le Sterifilt®, nous vous encourageons donc à utiliser la seringue **BD** (28G) si vous souhaitez l'utiliser.

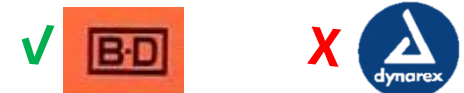

**Injection de comprimés (pilules) avec une seringue 3cc** : Utilisez le Sterifilt® en combinaison avec le filtre de coton du Maxicup®

Filtration combinée

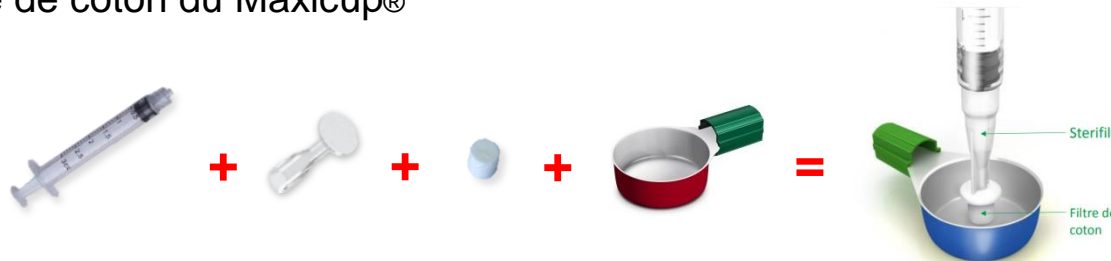

- 1) Installez le Sterifilt® sans l'aiguille
- 2) Filtrez la solution (appuyez le Sterifilt® sur le filtre en coton)
- 3) Retirez le Sterifilt®
- 4) Insérez l'aiguille

Le Sterifilt® a tendance à être obstrué par des particules si utilisé seul lors de la filtration de comprimés. Il faut donc procéder à une **filtration combinée**, en appuyant la membrane du Sterifilt® sur un des deux bords plats du filtre de coton.