

Rapport d'entretien préventif

Bain chauffant

SERVICE

Recherche clinique

Marque	VWR INTERNATIONAL LTEE	Date	2024-05-01
Modèle	WB05	No. GBM	801043
No. Série	W416B0867	No. SR	1258718

I Inspection générale

Réussite

À corriger

- 1.1 Vérifier l'état général, la propreté, le châssis de l'appareil et le câble d'alimentation
- 1.2 Vérifier le pavé numérique et l'écran
- 1.3 Vérifier les contrôles de température
- 1.4 Vérifier l'étanchéité du couvercle
- 1.5 Test de sécurité électrique
- 1.6 Vérification opérationnelle des paramètres

	✓	
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	

II Vérification opérationnelle

Paramètres	Tolérance	Programmées	Affichées	Mesurés	Déviations
Température (°C)	± 1,0	37	36,8	37	0,0

* Tolérance non disponible dans le manuel de l'appareil. Tolérance fournis par les utilisateurs selon leur besoin

Instrument de mesure	Thermomètre Fluke préc	Sonde température
No GBM	18061	72990
Certifié par	ITM	ITM
No de certification	C583292-00-05	C602142-00-02
Échéance du certificat	2024-06-09	2024-10-11

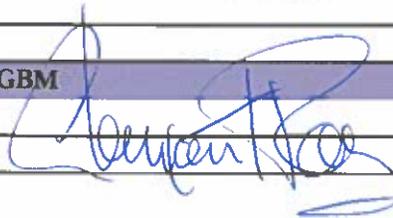
III Commentaire

IV Techniciens GBM

Titre

Clermont Roy

/ Technicien GBM

 2024-05/01