

EXERCICES BIA

MARjolène Di Marzio et Mylène Ostiguy
Conseillère en soins infirmiers
Soins Intensifs et Unité Coronarienne


Novembre 2018



Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal

Québec 

Analyser la courbe artérielle en fréquence 1 :2

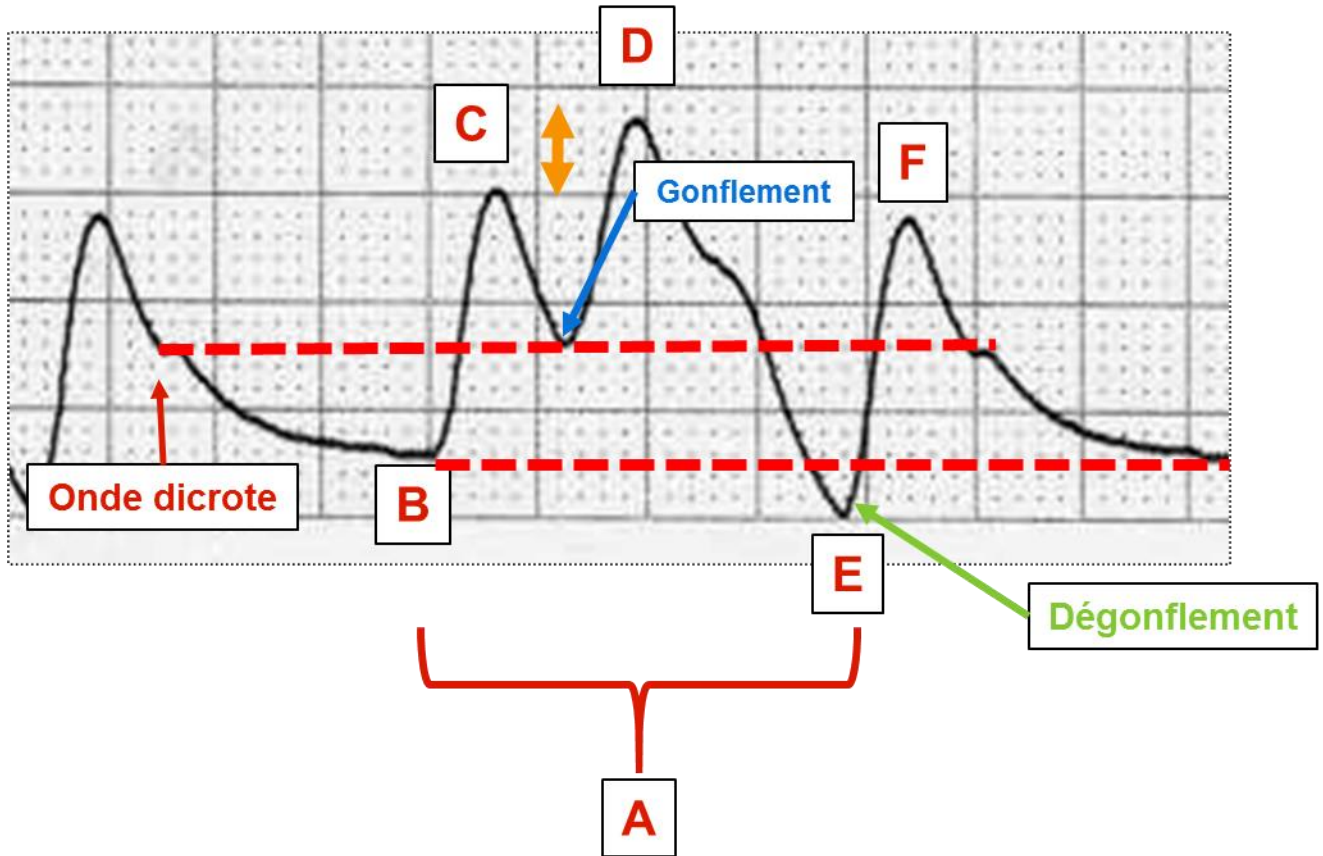

- A: Cycle cardiaque complet
- B: Diastolique non-assistée
- C: Systolique non-assistée
- D: Augmentation diastolique
- E: Diastolique assistée
- F: Systolique assistée

Synchronisation optimale

Gonflement


Onde dicrote **non visible**

«V» vient s'asseoir sur la ligne horizontale entre 2 ondes dicotes

Dégonflement

Diastolique assistée plus basse que la diastolique non-assistée

1.

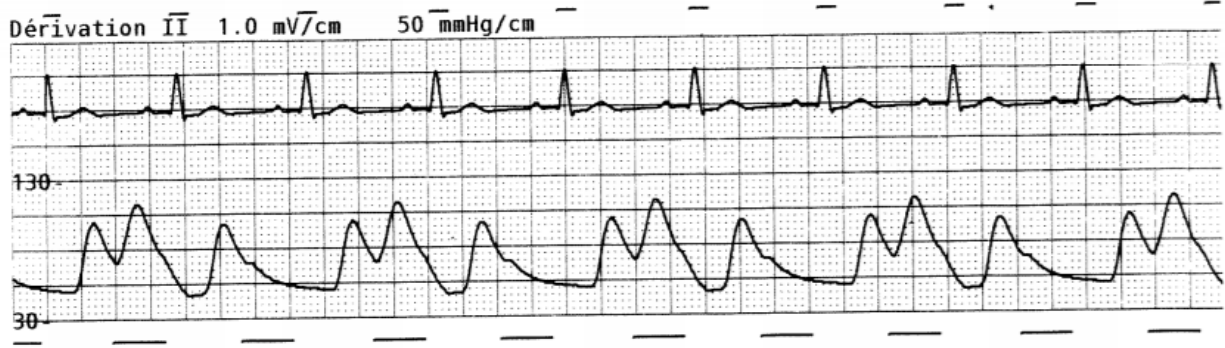


Gonflement : _____

Dégonflement : _____

Action : _____



2.

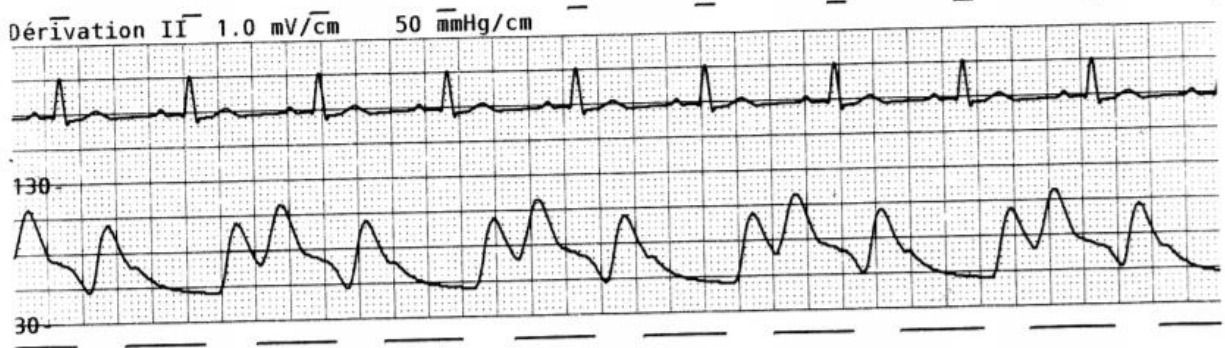

Gonflement : _____

Dégonflement : _____

Action : _____



3.




Gonflement : _____

Dégonflement : _____

Action : _____



4.

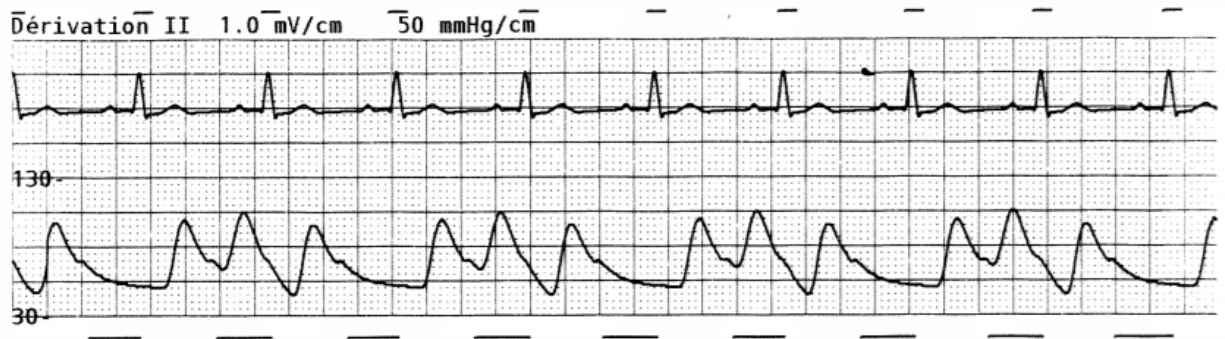

Gonflement : _____

Dégonflement : _____

Action : _____



5.




Gonflement : _____

Dégonflement : _____

Action : _____



6.

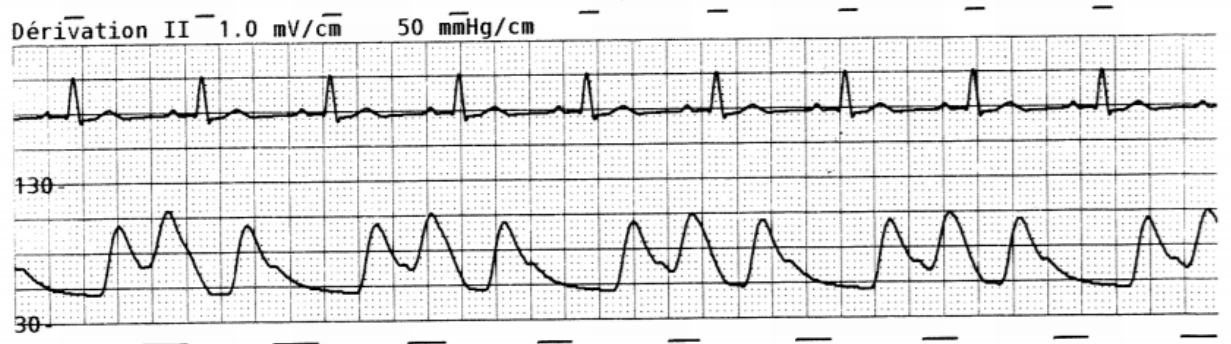


Gonflement : _____

Dégonflement : _____

Action : _____



7.

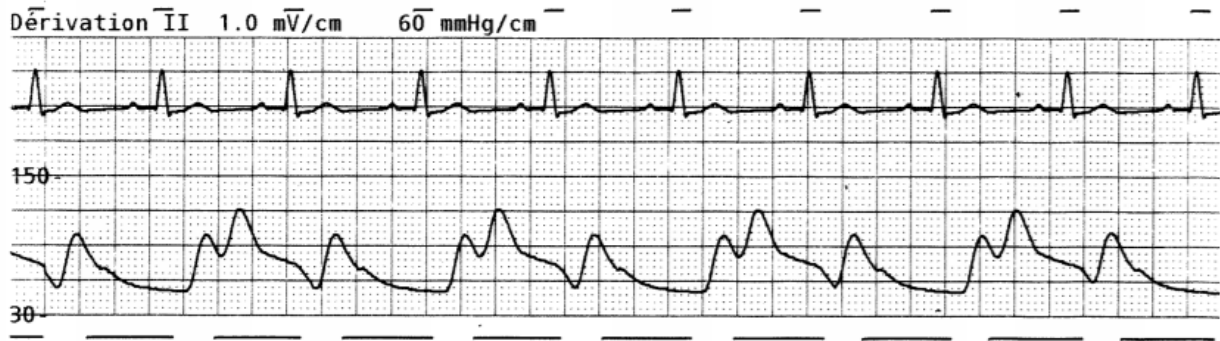


Gonflement : _____

Dégonflement : _____

Action : _____



8.

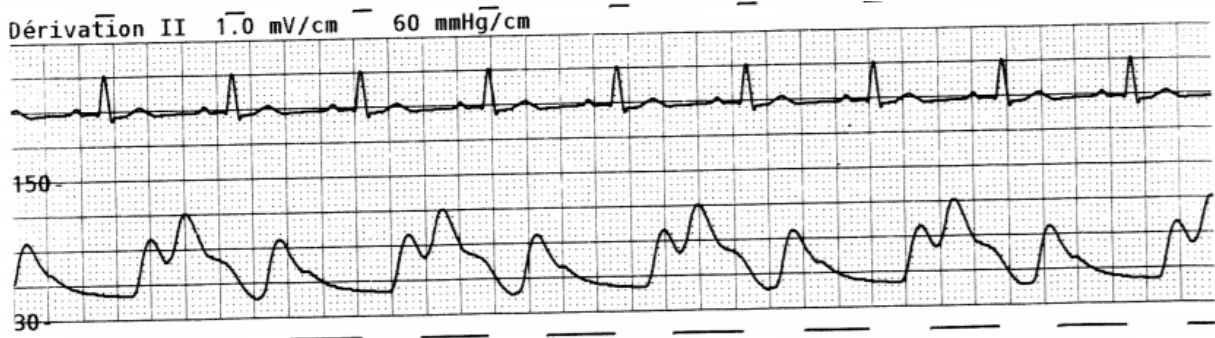


Gonflement : _____

Dégonflement : _____

Action : _____



9.

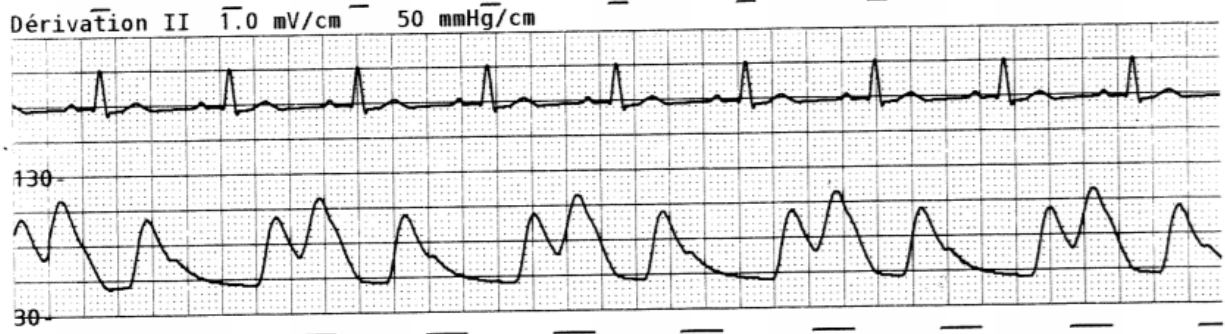


Gonflement : _____

Dégonflement : _____

Action : _____



10.

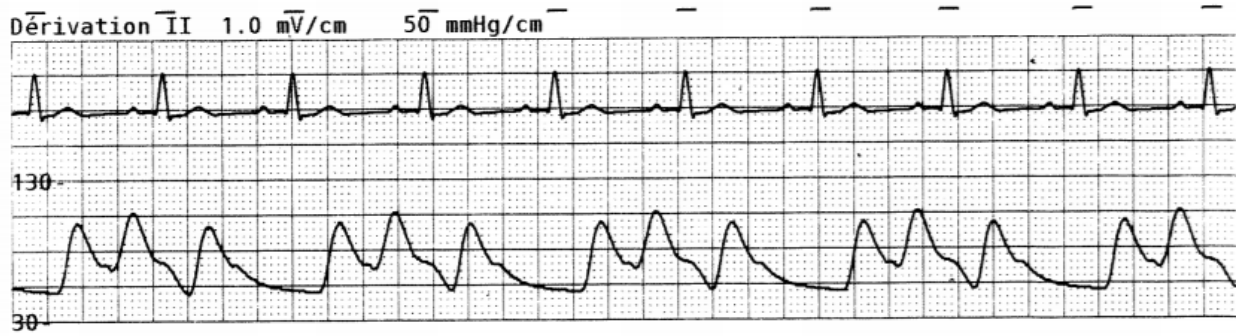

Gonflement : _____


Dégonflement : _____

Action : _____




Réponses


1. Gonflement : OK, Dégonflement : Prématuré, retarder le dégonflement

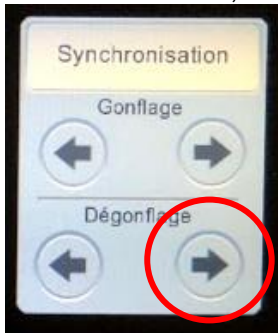

2. Gonflement : OK, Dégonflement : Tardif, devancer le dégonflement

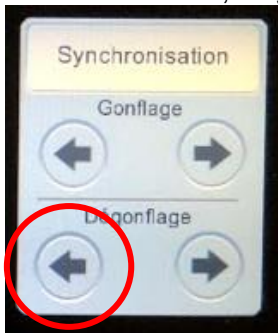

3. Gonflement : Prématuré, Dégonflement : Tardif, retarder le gonflement et devancer le dégonflement

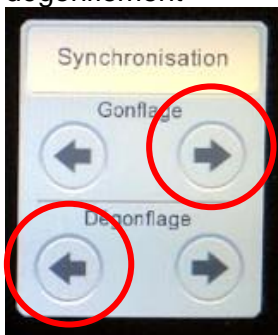


4. Gonflement : Tardif, Dégonflement : OK, devancer le gonflement




5. Gonflement : OK, Dégonflement : OK, pas d'action


6. Gonflement : tardif, Dégonflement : prématuré, devancer le gonflement et retarder le dégonflement

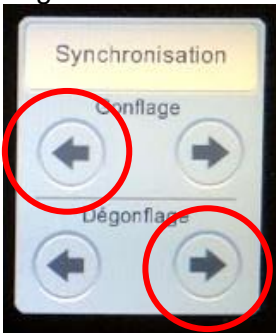


7. Gonflement : Prématuré, Dégonflement : tardif, retarder le gonflement et devancer le dégonflement

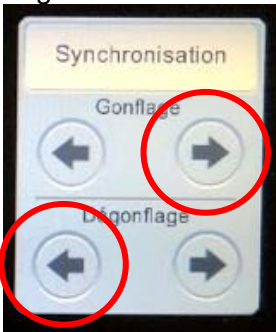

8. Gonflement : Prématuré, Dégonflement : prématuré, retarder le gonflement et le dégonflement

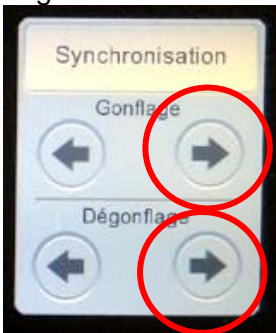

9. Gonflement : OK, Dégonflement : prématuré, retarder le dégonflement

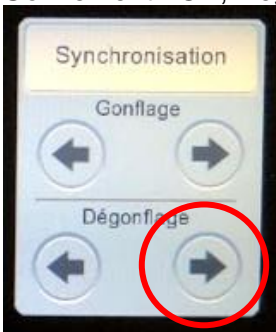

10. Gonflement : Tardif, Dégonflement : Tardif, devancer le gonflement et le dégonflement

